



지능형 파이펫 스탠드

보정 상태 확인

서비스 데이터 보기

준수 관리

Feature Rich, Easy to Use

간편한 파이펫 관리

간편한 파이펫 관리


여러분의 작업에 적합한 SmartStand

Rainin SmartStand는 간편한 지능형 파이펫 자산 관리 시스템으로서, 바쁜 실험실 및 실험실 관리자들에게 아래와 같은 장점을 제공합니다.

- 고장/사양 관련 비용 절감
- 사전 준수 관리
- 기록 보관 및 보고 시간 절약

SmartStand는 모든 Rainin XLS 및 XLS+ 브랜드 파이펫에 탑재된 RFID를 판독하여 최대 4개의 파이펫의 준수 상태를 수동 또는 전자 형태로 즉시 표시합니다. 파이펫을 들면 SmartStand의 컬러 LCD 화면이 파이펫의 서비스 및 교정 상태에 대한 자세한 내용을 표시합니다.

SmartStand는 EasyDirect™ 파이펫 자산 관리 소프트웨어와 독립적으로 또는 통합되어 작동하여 실험실 전반의 파이펫 자산 관리 및 추적 시스템을 구축합니다. EasyDirect는 파이펫 사용 기록, 서비스를 위한 파이펫 플래그 설정, 기타 실험실 관리 시스템(LIMS) 간의 데이터 간편 전송을 가능하게 하고 고유 데이터(예: 소유자, 신속 검사 방법 및 재고 번호)를 파이펫의 RFID 칩에 기록하여 실험실 자산 관리를 간편하게 수행할 수 있도록 해 줍니다.

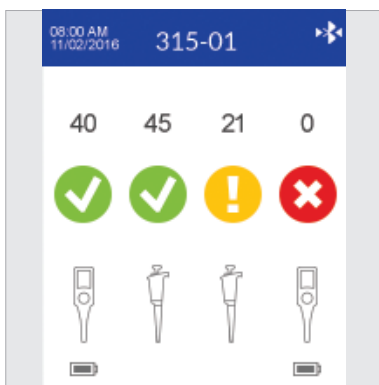

비용 절감

사양이 적합하지 않거나 서비스 기간이 지난 파이펫으로 인해 곤란한 일을 겪을 필요가 없습니다. SmartStand는 여러분의 작업을 명확하고 투명하게 도와줍니다.



준수 관리

뛰어난 맞춤형 자동화 시스템을 통해 파이펫 서비스, 보정 및 주기적 성능 확인을 사전에 관리할 수 있습니다.



시간 절약

SmartStand는 파이펫 관리를 단순화 및 간편화합니다. 모든 Rainin XLS 파이펫에 저장된 서비스 데이터를 표시하고 EasyDirect와 통합하여 좀 더 포괄적인 자산 추적 및 보고 시스템을 제공합니다.



SmartStand와 파이펫 걸이를 한 번에!

SmartStand는 액세서리 고정 키트를 통해 "스마트 걸이"로 변신할 수 있습니다.

빠른 RFID 리더가
파이펫 4개를 한 번에 스캔

읽기 쉬운 컬러 화면으로
파이펫 상태 표시

최대 4개의
E4 파이펫 동시 충전

탈부착 헤드로
벽 또는 선반
에 장착 가능

내장 블루투스
및 USB
미니 포트



SmartStand 및 EasyDirect™

강력한 자산 관리 도구

SmartStand

- 유연성, 확장 가능성
- 수동 및 전자식 XLS와 XLS+ 파이펫
- 사용자 정의 서비스/보정 간격
- 주기적인 성능 확인을 위한 신속검사 알림
- 직관적인 그래픽 인터페이스
- 110/220V, 50-60Hz
- 블루투스* 또는 USB를 통해 연결
- 스탠드를 사용하거나 옵션으로 제공되는 키트를 사용하여 헤드를 벽 또는 선반에 장착

EasyDirect 파이펫 자산 관리

- 여러 개의 SmartStand를 PC 1대에 연결
- 모든 브랜드/모델의 파이펫 추적 및 관리
- Rainin XLS 및 XLS+ 파이펫에서 RFID 칩 읽기/쓰기
- Excel, csv 또는 xml로 내보내기(추가, 덮어쓰기 또는 삭제)
- 자동 작업을 위한 스케줄러
- 서비스 요청 일정 수립
- 시스템 요건:

Windows 7(SP1) 이상, 5GB의 메모리 여유 공간 및 4GB의 RAM

Order No.	Description
30312897	Smart Charging Stand SCS-B
30312898	Smart Charging Stand SCS
30312899	Fastening Kit Magnetic SCS-FK-M
30313000	Fastening Kit Shelf SCS-FK-S
30313247	Fastening Kit Bracket SCS-FK-B
17012879	Elect Pipettes Pwr Supply E4-RCSWPS
30086494	ADP-BT-S Bluetooth RS232 Dongle

* SCS의 경우 블루투스 Dongle ADP-BT-S(주문 번호 30086494) 사용

www.mt.com/rainin

더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.

메틀러 토레도 코리아(주)

서울 서초구 양재천로19길
21 예일빌딩 1~4F, 06753

전화:1588-0180

팩스:02-3498-3557

기술적 변경 사항이 있을 수 있습니다.

© 10/2016 Mettler-Toledo Rainin, LLC

온라인 내용에서 요청에 따라 인쇄되었습니다. PB-269 Rev A (A4)